



F. Inpakken en versturen / Wrap and send

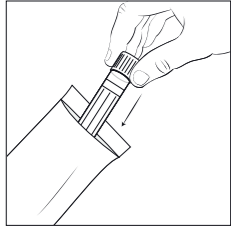


10. Stop het buisje in het witte zakje.
Place the tube into the white bag.

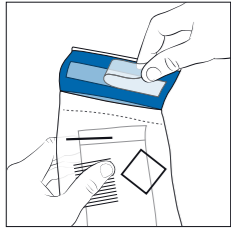


11. Doe het witte zakje met buisje daarna in de speciale plastic zak (Safetybag). Plak deze dicht met de plakrand.
Place the white bag with the tube into the special plastic bag (Safetybag). Close the bag using the adhesive strip.

with the tube into the special plastic bag (Safetybag). Close the bag using the adhesive strip.

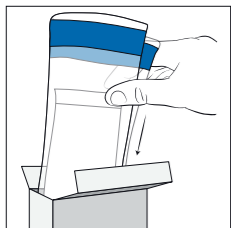


12. Stop de goed afgesloten Safetybag en sluit de doos.
Place the well-sealed Safety bag in the box and close the box.

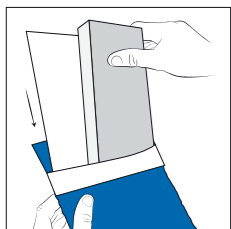

13. Doe de doos en het aanvraagformulier van uw arts in de verzendenvelop. Plak deze dicht met de plakrand.
Place the box and

your doctor's request form into the return envelope. Close the envelope using the adhesive strip.

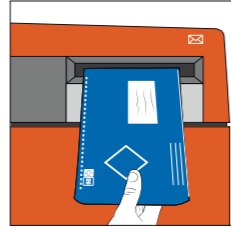

14. Belangrijk: Doe de verzendenvelop nog dezelfde dag op de post*, vóór de brievenbus geleegd wordt. Een postzegel is niet nodig.

Important: You should post the return envelope the same day, before the last collection. You do not need a stamp.*

* Lukt het niet om de envelop binnen 24 uur te versturen? Bewaar het materiaal dan in de koelkast totdat verzenden wel mogelijk is.

* If you are unable to send the envelope within 24 hours, store the material in the fridge until you are able to send it.

Vragen?

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw (huis)arts of ons Klant Contact Centrum. Het Klant Contact Centrum van RHMDC is te bereiken op maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur op 088 260 4000.

Questions?

If you have any questions, please contact your doctor/GP or our Customer Contact Centre. The RHMDC Customer Contact Centre is available from Monday to Friday, from 8 a.m. to 5 p.m., tel. 088 260 4000.

Soa-test – uitstrijkje (eSwab)

Deze test is voor onderzoek naar seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's). Voor de test maakt u een uitstrijkje uit de vagina of de anus. Het is pijnloos en duurt ongeveer 5 minuten. U kunt de test op ieder moment van de dag afnemen, ook als u ongesteld bent.

STD test - swab test (eSwab)

This test serves to diagnose sexually transmitted diseases (STDs). To do the test, you must take a swab from your vagina or anus. It does not hurt and will take about 5 minutes. You can do the test at any time of the day, including when you are having your period.

Gebruiksaanwijzing soa test - eSwab / Instructions for STD test - eSwab

A. Inhoud van de doos

- De gebruiksaanwijzing
- Barcodevel
- Aanvraagformulier
- Buisje en wattenstaafje (eSwab)
- Wit zakje
- Plastic zakje
- Verzendenvelop

B. Belangrijk

Lees de hele uitleg op beide kanten van deze gebruiksaanwijzing.

Volg stap 1 t/m 14.

Volg de instructie die voor u van belang is (zie D1 en D2). Indien u een uitstrijk van de vagina én anus moet maken, gebruikt u voor elk lichaamsdeel een nieuwe wattenstok.

A. Package content

- Instruction leaflet
- Barcode sheet
- Request form
- Tube and cotton swab (eSwab)
- White bag
- Plastic bag
- Return envelope


B. Important

Read the full explanation in full on both sides of this instruction leaflet.

Carry out steps 1 to 14.

Follow the instructions that are relevant to you (see D1 and D2). If you need to take a swab of both the vagina and the anus, you must use a separate cotton swab for each body area.

C. Voorbereiding / Preparation

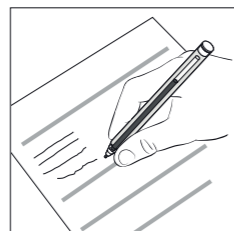


1. Controleer of uw gegevens zijn ingevuld op het aanvraagformulier en vul deze eventueel aan. Zodra u de test afneemt, noteert

u de afnamedatum en -tijd op het aanvraagformulier.

Check whether your data have been entered on the doctor's request form and if necessary complete them. As soon as you take the swab, you should note the date and time on the request form.




2. Was uw handen met water en zeep en droog uw handen met een schone handdoek. Wash your hands using water and soap and dry your hands using a clean towel.

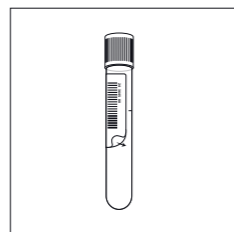

3. Maak de verpakking open en haal alleen het busje uit de verpakking. Plak de barcode 'A divers materiaal' recht op de bus zoals de


afbeelding. Maak de bus nog niet open. Open the box and take out the tube. Do not open the tube yet. Stick on the barcode 'A divers materiaal', as shown in the image.

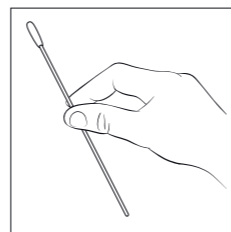


4. Pak het wattenstaafje. Raak het watje niet aan! Zodra u het wattenstaafje laat vallen of neerlegt, moet u het wattenstaafje weggoien.

Pick up the cotton swab. Don't touch the cotton! As soon as you drop or put down the cotton swab, you should dispose of it.

D1. Uitstrijkje uit de vagina / Vaginal swab

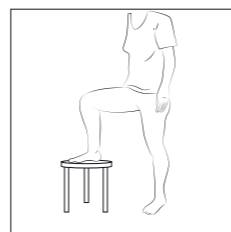


5a. Neem een gemakkelijke houding aan. Zoals bij het inbrengen van een tampon. Get into a comfortable position. For instance, as if you were inserting a tampon.

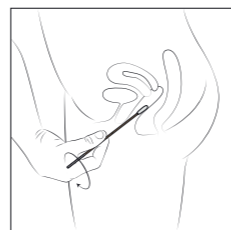


5b. Breng het wattenstaafje ongeveer 5 tot 6 cm in de vagina. Draai het staafje voorzichtig 5 keer rond.

Insert the cotton swab about 5 to 6 cm into the vagina. Twist the cotton swab carefully 5 times.

D2. Uitstrijkje uit de anus / Anal swab

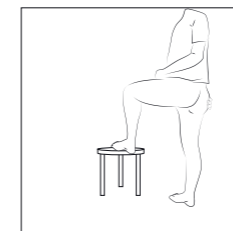


5a. Ga gemakkelijk staan. Trek één van de billen opzij. Take up a comfortable standing position. Pull one of your buttocks aside.

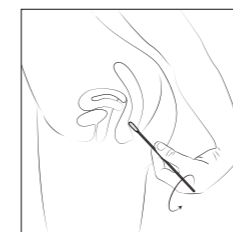

5b. Breng het wattenstaafje ongeveer 3 tot 5 cm in de anus (net als een thermometer), en draai het staafje voorzichtig 5 keer rond.


Insert the cotton swab about 3 to 5 cm into the anus (as you would with a thermometer), and twist the cotton swab carefully 5 times.

E. Na de test / After the test

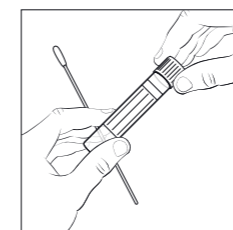


6. Houd het wattenstaafje in het midden vast, raak het watje niet aan. Pak het busje op en draai de dop los. Laat de vloeistof in het busje.


Hold on to the cotton swab in the middle - do not touch the cotton. Pick up the tube and untwist the lid. Leave the liquid in the tube.

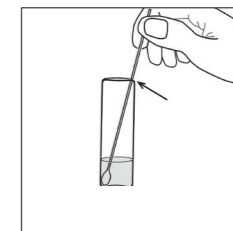


7. Plaats de wattenstok tot op de bodem van het busje. Place the cotton swab into the tube until it touches the bottom.

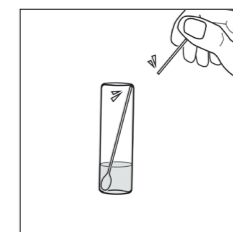

8. Breek de wattenstok af op het afbreekrandje. Snap the cotton swab at the break-off lip.

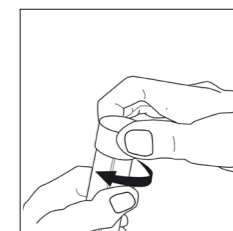

9. Draai het dopje op het busje. De wattenstok moet zijn vastgedraaid in het dopje. Twist the lid onto the tube. The cotton swab should be twisted tight into the lid.

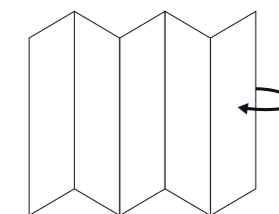

De uitleg staat op de voor- en achterkant van deze gebruiksaanwijzing.

The explanations are on the front and back of this instruction leaflet.