

Cyberlab: inrichten van eigen panels

Inleiding

Cyberlab kent twee soorten eigen panels. Met eigen panels voor orderinvoer kunnen gebruikers zelf persoonlijke bepalingspakketten toevoegen die gebruikt kunnen worden voor orderinvoer op het tabblad "Aanvraagcodes" tijdens het orderproces. Deze panels worden getoond binnen het tabblad "Eigen Praktijk" en kunnen beheerd worden door zowel individuele gebruikers als key users.

Daarnaast zijn er eigen panels voor resultaatconsultatie. Zo'n panel werkt als een filter waarmee een vaste selectie van bepalingen/orderinformatie wordt getoond. Zulke panels kunnen bijvoorbeeld ingericht worden gerelateerde bepalingen bij elkaar getoond te laten worden.

Beheer door key users

Op dit moment kent Cyberlab geen mogelijkheid om vanaf een account de eigen panels van een ander account te beheren. De key user moet hiervoor toegang krijgen/nemen tot andermans account. Volg hiervoor de volgende stappen:


1. Verander hiervoor het wachtwoord van de gebruiker waarvoor de eigen panels aangepast moeten worden.
2. Login op het account van deze gebruiker en voer de wijzigingen door.
3. Wissel naar het account van de key user.
4. Ga naar het gebruikersinformatiescherm van het account waarvan de eigen panels zijn aangepast.
5. Zet de instelling "Wachtwoord wijzigen bij volgende aanmelding:" op "Ja" en deel het huidige wachtwoord met betreffende gebruiker.

De werkinstructie "gebruikers beheren voor key users" bevat aanvullende instructies met betrekking tot beheer van gebruikersaccounts.

Beheer eigen panels

Het beheren van eigen orderinvoerpanels gaat als volgt:

Klik na inloggen in Cyberlab rechtsboven op je naam, en daarna op "Instellingen".

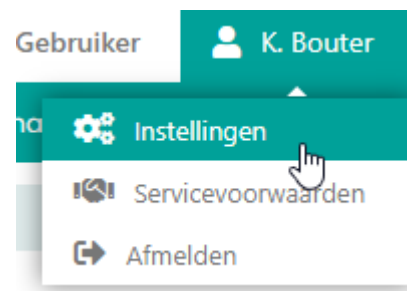

ORDERINVOER

Algemeen
Mijn panels

Navigeer vervolgens in de linker zijbalk naar het kopje "orderinvoer" en klik op "Mijn panels".

Nu wordt er een zoekscherm getoond waarmee naar eigen panels gezocht kan worden. Klik rechtsboven op "Zoek" om alle bestaande eigen panels te tonen en eventueel te bewerken, of op "Nieuw" om een nieuw panel aan te maken.

Nieuw orderinvoerpanel aanmaken

Voer bij parameters de gewenste naam in die in het overzicht gekoppeld zal worden aan het eigen panel. Kies vervolgens binnen de beschikbare tabbladen naar de gewenste bepalingen en vink deze aan. Als het niet mogelijk is om een bepaling aan te vinken dan komt dat doordat de bepaling niet beschikbaar is voor het profiel dat gekoppeld is aan de gebruiker.

.. Klinische Chemie Allergie Immunologie Geneesmiddelen Microbiologie Probleemgestuurd aanvragen Zoeken

Bloed Feces

Urine Feces

Feces Feces

Overig Calprotectine in feces Elastase in feces Bloed in feces Vet in feces

Klik nadat alle gewenste bepalingen aangevinkt zijn rechtsboven in het scherm op "Aanmaken" om het eigen panel aan te maken.

Overzicht

Tip: met de knop "Overzicht" rechtsboven in het scherm kan een overzicht getoond worden met de reeds aangevinkte bepalingen.



Bestaand orderinvoerpanel wijzigen

Navigeer naar Instellingen > Resultaatconsultatie > Mijn panels (zoals hierboven beschreven). Zoek op het panel dat gewijzigd dient te worden en klik dit aan om het panel te bewerken. Dit panel kan nu bewerkt worden op dezelfde manier als waarop een nieuw panel aangemaakt wordt.

Eigen panels voor resultaatconsultatie

Het beheren van eigen resultaatconsultatie gaat als volgt:

Klik na inloggen in Cyberlab rechtsboven op je naam, en daarna op "Instellingen".

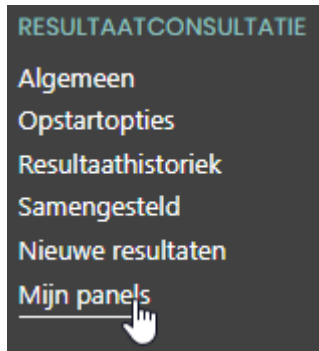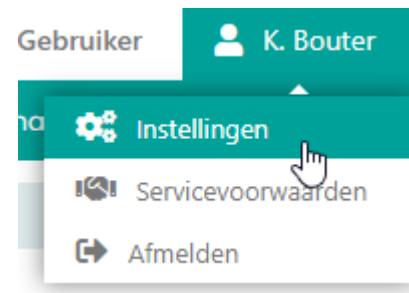

Navigeer vervolgens in de linker zijbalk naar het kopje "resultaatconsultatie" en klik op "Mijn panels".

Nu wordt er een zoekscherm getoond waarmee naar eigen panels gezocht kan worden. Klik rechtsboven op "Zoek" om alle bestaande eigen panels te tonen en eventueel te bewerken, of op "Nieuw" om een nieuw panel aan te maken.

Nieuw resultaatconsultatiepanel aanmaken

Voer bij parameters de gewenste naam in die in het overzicht gekoppeld zal worden aan het eigen panel en laat "Gebruiksdetail" op beide staan. Kies vervolgens binnen de beschikbare tabbladen naar de gewenste bepalingen/orderinformatie en vink deze aan.

Klik nadat alle gewenste bepalingen/orderinformatie aangevinkt zijn rechtsboven in het scherm op "Aanmaken" om het eigen panel aan te maken.

Bestaand resultaatconsultatiepanel wijzigen

Navigeer naar Instellingen > Resultaatconsultatie > Mijn panels (zoals hierboven beschreven). Zoek op het panel dat gewijzigd dient te worden en klik dit aan om het panel te bewerken. Dit panel kan nu bewerkt worden op dezelfde manier als waarop een nieuw panel aangemaakt wordt.